

Highlights

HYG 1 1.0 09/2018-IT



Cleaning Rack 39220 CA

Pulizia validata semplificata

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE



Cleaning Rack 39220 CA

Pulizia validata semplificata

Il nuovo Cleaning Rack 39220 CA è adatto per la pulizia in lavaferri e per la conservazione di strumenti SILCUT®, di strumenti a pinza sec. KLEINSASSER e di altri strumenti con attacco LUER della lunghezza operativa di max. 22 cm (fino a 12 strumenti).

Per garantire una pulizia accurata ed uniforme degli strumenti, si collega bilateralmente l'attacco di irrigazione ad un'unità di pulizia e disinfezione. Gli alloggiamenti non utilizzati vengono chiusi con un tappo LUER per evitare una perdita di pressione durante il processo di pulizia.


Il Cleaning Rack, grazie ai perni di fissaggio, può essere posizionato in tutti i cestelli universali della ditta KARL STORZ, garantendo così la conservazione sicura degli strumenti.

Il Cleaning Rack può essere utilizzato con i seguenti accessori:

- 39100 PS **Perno di fissaggio**, inclusa vite e rondella, altezza 38 mm, confezione da 12 pezzi
- 39502 Z **Cestello perforato**, per pulizia, sterilizzazione e conservazione di strumenti, impilabile, dimensioni esterne (l x p x h): 480 x 250 x 66 mm

Caratteristiche:

- È possibile inserire fino a dodici strumenti
- Attacco tramite LUER-Lock standard
- Compatibile con qualsiasi cestello universale della ditta KARL STORZ
- Pulizia accurata ed uniforme degli strumenti grazie a collegamento bilaterale dell'attacco di irrigazione ad un'unità di pulizia e disinfezione
- Ulteriore fissaggio degli strumenti tramite nastro in silicone
- Attacco di irrigazione ed alloggiamento adattabile all'angolazione degli strumenti

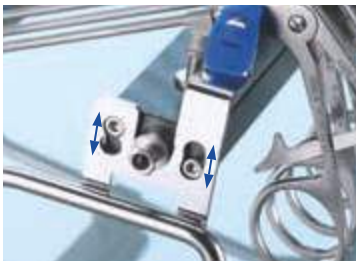

Per adattare l'inclinazione dell'attacco di irrigazione, allentare le viti poste sui due lati con una brugola e riavvitarle poi saldamente nella nuova posizione. Così si garantisce che anche gli strumenti SILCUT® e gli strumenti a pinza sec. KLEINSASSER con un'altra angolazione siano compatibili con il Cleaning Rack.

- 39220 CA **Cleaning Rack**, per 12 strumenti, per impiego con strumenti SILCUT® e strumenti sec. KLEINSASSER con attacco LUER

Introduzione sul mercato:

Il Cleaning Rack 39220 CA è da subito disponibile.

Si consiglia di verificare l'adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell'uso.



STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 (0)7461 708-0
Telefax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com