

EMOXICEL®
TAF RETILIGHT
Textile Acidic Form



È costituito da tessuto ritagliabile e suturabile. Indicato ove sia necessario avvolgere la struttura sanguinante per prevenire il sanguinamento nelle prime fasi postchirurgiche in particolare dove si preferisca utilizzare piccole quantità di emostatico di spessore minimo. Trova applicazione in tutti gli interventi di chirurgia, in chirurgia vascolare e neurochirurgia.



CODICE	DIMENSIONE	PEZZI	N. REPERTORIO
60152	cm. 5,0 x 1,25	10	2075044
60155	cm. 5,0 x 2,5	10	2075045
60148	cm. 5,0 x 7,5	10	2075020
60150	cm. 5,0 x 35,0	10	2075035
60156	cm. 10,0 x 5,0	10	2075046
60157	cm. 10,0 x 7,5	10	2077016
60158	cm. 10,0 x 10,0	10	2075047
60151	cm. 10,0 x 20,0	10	2075040

EMOXICEL®
EMIPOL



Formato in polvere pronto all'uso costituito al 100% dal suo principio attivo che è il sale di calcio idrogenato di cellulosa ossidata. L'efficacia e sicurezza dei sali di calcio idrogenato di cellulosa ossidata è confermata dall'esperienza nella cura delle ferite. EMIPOL oltre al potere emostatico favorisce il processo di guarigione grazie alla spiccata attività di stimolazione dei fibroblasti, è particolarmente indicato per i sanguinamenti a nappo su superfici estese o irregolari dove, grazie alla sua formulazione in polvere, può raggiungere la fonte del sanguinamento.



CODICE	QUANTITA'	PEZZI	N. REPERTORIO
60177	1 g	5	2075009
60178	3 g	5	2075018
60179	5 g	5	2075019



EMOXICEL®
the new generation cellulose



MEDICAL S.p.A.

Sede Legale: Viale Porto Torres, 64 - 07100 Sassari - Tel. +39 079 2675033
Ufficio Commerciale: Via G.B. Pergolesi, 16 - 20124, Milano - Tel. +39 02 99247214
C.F. e P.IVA: 00268210903 | e-mail: info@medicalspa.it
www.medicalspa.it




EMOXICEL®
La nuova generazione della cellulosa

L'EMOSTATICO topico che agisce in
SINERGIA con le mani del **CHIRURGO**



EMOXICEL® è un emostatico a base di **cellulosa ossidata** dalle caratteristiche chimiche e fisiche eccellenti che ne fanno un emostatico di primo impiego sicuro, efficace ed affidabile.

La materia prima è il **cotone "Pima"** caratterizzato dal contenuto di alfa-cellulosa superiore al 98% e da una naturale omogeneità di fibre elicoidali, lunghe e sottili.

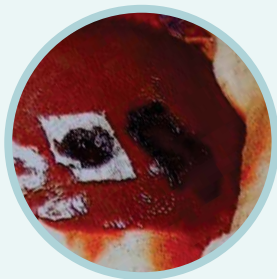

LA CELLULOSA OSSIDATA

La cellulosa ossidata di **EMOXICEL®** non viene rigenerata perché l'alto contenuto di alfa cellulosa del **cotone "Pima"** rende inutile l'estrazione, con procedimenti chimici, di impurità quali lignina, resine o emicellulose, inoltre un procedimento di rigenerazione, danneggerebbe le naturali qualità fisiche delle fibre elicoidali, essenziali per la tessitura del **Cotton Maze®**.

Per questa serie di motivi **EMOXICEL®** è realizzato in modo necessariamente rispettoso della materia prima e volutamente rispettoso dell'ambiente*.

Un procedimento di ossidazione controllata mantiene intatte le caratteristiche fisiche delle fibre ed induce la formazione di una percentuale ottimale (16-24%) di gruppi carbossilici (-COOH). Questo lo rende biodegradabile al 100% e riassorbibile entro 8 giorni dalla sua applicazione senza effetti collaterali.

EMOXICEL®, grazie al giusto grado di acidità, ha dimostrato *in vitro** un'azione batteriostatica e battericida a largo spettro. Inoltre aiuta ad accelerare i processi biochimici e favorisce il processo di guarigione.




* MEDICAL ha deciso di evitare inutili sofferenze agli animali certificando il potere antibatterico di EMOXICEL esclusivamente con prove di laboratorio *in vitro*, come suggerito dalla normativa europea (Direttiva 2010/63/UE - recepita dal D.Lgs. 26/2014).

LASCIATI STUPIRE DAL LABIRINTO DI COTONE

La trama **Cotton Maze®** favorisce l'emostasi grazie alla tessitura ad alta densità delle fibre elicoidali che risultano omogenee, lunghe e sottili.

Il **Cotton Maze®** è un labirinto di fibre di origine naturale che sono state trattate chimicamente per conferire potere emostatico ed intrecciate in modo da migliorarne la capacità di assorbimento controllato del sangue.

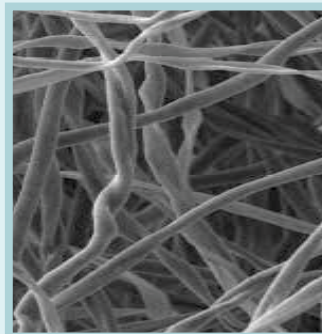

COTTON MAZE®

La trama particolare della **Cellulosa Ossidata di EMOXICEL®**:

- Garantisce una rapida azione emostatica (entro 2 minuti)
- Assorbe una maggiore quantità di sangue
- Induce la formazione del coagulo stabile
- Tampona come una garza
- Non aderisce agli strumenti chirurgici
- Concentra i fattori della coagulazione

ALTRI PRODOTTI



EMOXICEL



INQUADRA E GUARDA IL VIDEO



EMOXICEL® FAM Trium

Fibrillary Advanced Material

Formato fibrillare non tessuto **multistrato** che ne consente facilmente la separazione in uno o più strati dello spessore desiderato. È estremamente versatile e può essere usato sotto forma di piccolo zaffo o come copertura della struttura sanguinante. È maneggevole sia da asciutto che da bagnato. Può essere usato in tutti gli interventi che richiedono assorbimento del sangue e potenziamento dell'emostasi.

CODICE	DIMENSIONE	PEZZI	N. REPERTORIO
60172	cm, 2,5 x 5,0	10	2074957
60173	cm, 5,0 x 10,0	10	2074981
60174	cm, 10,0 x 10,0	10	2074989



EMOXICEL® FAM Strata

Fibrillary Advanced Material

Formato fibrillare non tessuto **monostrato**, ad alta densità che può essere usato tal quale dove si richiede un alto assorbimento o separato in strati di spessore desiderato. La sua compattezza lo rende il formato ideale per interventi endoscopici.

CODICE	DIMENSIONE	PEZZI	N. REPERTORIO
60168	cm, 2,5 x 5,0	10	2074943
60169	cm, 5,0 x 10,0	10	2074907
60170	cm, 10,0 x 10,0	10	2474888



EMOXICEL® FAM OcW*

Fibrillary Advanced Material

Particolare formato fibrillare studiato per applicazioni che richiedano di tamponare un'emorragia e riempire una cavità. Indicato per interventi oncologici, urologia, chirurgia generale e ginecologia.

CODICE	QUANTITA'	PEZZI	N. REPERTORIO
60176	2 g	2	2074921



*Oxidized Cotton Wool